

MGH0081

Expired since / expiré depuis le / expirado desde el / scaduto dal / abgelaufen seit dem

16/01/2023

**Product Sheet (EN)**

**2**

**Fiche Produit (FR)**

**4**

**Ficha producto (ES)**

**6**

**Scheda Prodotto (IT)**



**8**

**Eigenschaften (DE)**

**10**

**PRODUCT SHEET**

Expired since 16/01/2023

	Type	Rechargeable battery	 
	Commercial designation	Batterie médicale Novacor MAPA 3.6V 0.8Ah S	
	Reference	MGH0081	
	EAN	3660766507969	
	Brand	NX	
	Compatible / Original battery	Compatible	
	Packaging	Unitary	

**RECOMMENDED USAGE**

*Follow the instructions and recommendations specific to each model, using the technical instructions and document resources from the devices in which the battery is used*

Brands	Equipment	Models	PN
Novacor / Diasys	Monitor	Mapa	ACC-0750-00

<b>Identification</b>	<b>GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS</b>	Chemistry	NiMH
		Type	prismatic cell
		IEC designation	3 HF18/07/49
		Rated voltage	3.6V
		Nominal capacity	0.8Ah
		Internal resistance $\Omega$	105m $\Omega$

*The voltage and the actual capacity in use can be affected by several factors, especially the temperature, the discharge current, the pack's history (ex:use, storage), etc*


<b>ELECTRICAL CHARACTERISTICS</b>	<b>CHARGE</b>	Maximum charging voltage	5.1V
		Standard charging current (14h)	80mA
		Fast charging current (1,1h)	400mA
	<b>DISCHARGE</b>	Range of operating voltage	3V at 4.2V
		Min tension in discharge	3V
		Max discharge current	1000mA
		Lifespan 80% DOD (0,5 C)	>500 Cycles
	<b>MAINTENANCE</b>	Frequency of maintenance charges at 20°C	6 Months
	<b>CONTROL ELECTRONICS</b>	Electrical protection	No
		Low voltage power cut	No
		High voltage power cut	No
		Max power cut voltage	No






*These devices not only designed to protect the pack in case of an equipment failure. They must not be used to control the discharge. The protection circuits have a response time of a few milliseconds.*

<b>MECHANICAL CHARACTERISTICS</b>	Dimensions (+/- 2mm)	Length	18.2mm
		Width	17.1mm
		Depth	59.3mm
	Weight (+/- 5g)		62Gr.
	Mechanical protection		Shrink sleeve
	Wire length (+/- 10mm)		None
	Terminal		None
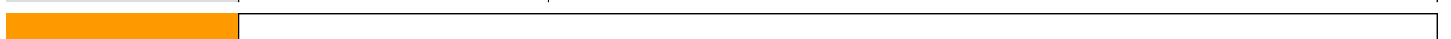
<b>CONDITIONS OF USE, STORAGE, AND TRANSPORT</b>	<b>CONDITIONS OF USE</b>	Charging temperature	0 at 45°C
		Discharge temperature	-20 at 45°C
	<b>CONDITIONS OF STORAGE</b>	Storage temperature	-20 at 30°C
		Level of humidity	65,00 %
		Max storage time	2 Years
	<b>TRANSPORT</b>	UN code	Classe 9
		ADR/RID classification	Classe 9
		IMDG classification	Classe 9
		IATA classification	Classe 9



<b>INSTRUCTIONS</b>	<b>COMMISSIONING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the batteries and the connectors: wires not damaged, battery not swollen, burnt smell, oxidation of the connectors, leak...</li> <li>• Respect the polarity</li> <li>• Do a full charge with the adequate charger before the first use</li> </ul>
	<b>CHARGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use an adequate charger</li> <li>• The battery is warmer during the charge: during the first charge, check that the battery's temperature stays in the temperature operating ranges.</li> <li>• In case of an abnormal heating, stop the charge by unplugging the charger within the realms of possibility, remove the battery from the equipment de l'équipement, have the equipment, the battery and the charger checked by a technician.</li> </ul>
	<b>CASE OF NON-WATERPROOF BATTERIES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• It is normal to observe a release of gas during the charge and use. Do not smoke. Place in suitable premises.</li> <li>• Open batteries need regular maintenance carried out by a qualified technician.</li> </ul>
	<b>CASE OF LITHIUM ION BATTERIES</b>	There is a fire hazard with lithium ion batteries in the following cases: overload, short circuit, charge and use outside the voltage and temperature ranges.
	<b>WARNINGS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Read the instructions of your device.</li> <li>• Only use in compatible devices.</li> <li>• Respect the load and storage conditions.</li> <li>• Do not use if the battery is damaged, do not burn, do not pierce, do not dismantle or modify. The protection circuits protect the battery and the equipment: do not deactivate them.</li> </ul>



<b>EXPLANATION OF SYMBOLS</b>	<b>LABELLING</b>	
		Catalogue reference
		Lot number
		manufacturer's address
		To recycle in a suitable salvage and recycling structure
		Read the product sheet and the instruction manual

**FICHE PRODUIT**

Expiré depuis le 16/01/2023

<b>IDENTIFICATION DU DISPOSITIF MEDICAL</b>	Type	Batterie rechargeable		
	Désignation commerciale	Batterie médicale Novacor MAPA 3.6V 0.8Ah S		
	Référence	MGH0081		
	EAN	3660766507969		
	Marque	NX		
	Batterie compatible / origine	Compatible		
	Conditionnement	Unitary		

**UTILISATION RECOMMANDÉE**

*Suivre les instructions et recommandations spécifiques à chaque modèle en se référant aux notices et documentations techniques des équipements dans lesquels la batterie est utilisée.*

Marques	Equipement	Modèles	PN
Novacor / Diasys	Monitor	Mapa	ACC-0750-00

<b>Identification</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES</b>	Technologie	NiMH
		Type	prismatic cell
		Désignation IEC	3 HF18/07/49
		Tension nominale	3.6V
		Capacité nominale	0.8Ah
		Résistance interne Ω	105mΩ

*La tension et la capacité réelle en utilisation peuvent être affectées par divers facteurs, notamment la température, le courant de décharge, l'historique du pack (ex : application, stockage), etc*






<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>	<b>CHARGE</b>	Tension de charge maxi	5.1V
		Courant Charge Standard (15h)	80mA
		Courant Charge Rapide (2,5h)	400mA
	<b>DÉCHARGE</b>	Plage de tension d'utilisation	3V à 4.2V
		Tension min en décharge	3V
		Courant de décharge maxi	1000mA
		Durée de vie 80% DOD (0,5 C)	>500 Cycles
	<b>ENTRETIEN</b>	Fréquence charges d'entretien à 20°C	6 Mois
	<b>ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE</b>	Protection électrique	Non
		Coupure tension basse	Non
		Coupure tension haute	Non
		Courant max de coupure	Non

*Ces appareils sont seulement conçus pour protéger le pack en cas de défaillances du matériel. Ils ne doivent pas être utilisés pour contrôler la décharge. Les circuits de protection ont un temps de réponse de l'ordre de quelques millisecondes.*

<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b>	Dimensions (+/- 2mm)	Longueur	18.2mm
		Largueur	17.1mm
		Épaisseur	59.3mm
	Poids (+/- 5g)		62Gr.
	Protection mécanique		Shrink sleeve
	Longueur fils (+/- 10mm)		None
	Terminaison		None






<b>CONDITIONS D'UTILISATION, DE STOCKAGE &amp; DE TRANSPORT</b>	<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Température de charge	0 à 45°C
		Température de décharge	-20 à 45°C
	<b>CONDITIONS DE STOCKAGE</b>	Température de stockage	-20 à 30°C
		Taux d'humidité	65,00 %
		Durée de stockage maxi	2 Ans
	<b>TRANSPORT</b>	Code UN	Classe 9
		Classification ADR/RID	Classe 9
		Classification IMDG	Classe 9
Classification IATA		Classe 9	



<b>INSTRUCTIONS</b>	<b>MISE EN SERVICE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôler la batterie et la connectique : fils non abimés, batterie non gonflée, odeur de brûlé, oxydation des contacts, fuite...</li> <li>• Respecter la polarité</li> <li>• Réaliser une charge complète avec un chargeur adapté avant la première utilisation</li> </ul>
	<b>CHARGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser un chargeur adapté.</li> <li>• La batterie s'échauffe pendant la charge : surveiller à la première charge que la température reste dans les plages d'utilisation.</li> <li>• En cas d'échauffement anormal interrompre la charge en débranchant le chargeur dans la mesure du possible démonter la batterie de son équipement faites contrôler l'équipement, le chargeur et la batterie par un technicien.</li> </ul>
	<b>CAS DES BATTERIES NON ÉTANCHES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendant la charge et l'utilisation il est normal qu'un dégagement de gaz se produise. Ne pas fumer. Charger dans un local adapté.</li> <li>• Les batteries ouvertes nécessitent un entretien régulier qui doit être effectué par un technicien spécialisé.</li> </ul>
	<b>CAS DES BATTERIES LITHIUM ION</b>	Les batteries lithium ion présentent un risque d'incendie dans les cas suivants : surcharge, court circuit, charge et utilisation hors plage de température et de tension.
	<b>AVERTISSEMENTS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulter la notice de votre appareil.</li> <li>• Utiliser uniquement dans les appareils compatibles.</li> <li>• Respecter les conditions de charge et de stockage.</li> <li>• Utiliser uniquement dans les appareils compatibles.</li> <li>• Ne pas utiliser si la batterie est endommagée ne pas brûler, ne pas percer, ne pas démonter ou modifier, les circuits de protection protège la batterie et l'équipement : ne pas les désactiver.</li> </ul>

<b>EXPLICATIONS SYMBOLES</b>	<b>ETIQUETAGE</b>	
		Référence catalogue
		Numéro de lot
		Adresse fabricant
		À recycler dans une structure de récupération et de recyclage adaptée
	Consulter la fiche produit et le manuel d'utilisation	

FICHA PRODUCTO			Expirado desde el 16/01/2023
IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO	Tipo	Baterías Recargable	
	Designación comercial	Batterie médicale Novacor MAPA 3.6V 0.8Ah S	
	Referencia	MGH0081	
	EAN	3660766507969	
	Marca	NX	
	Batería Compatible / Original	Compatible	
Acondicionamiento	Unitary		
<b>USO RECOMENDADO</b>			
<i>Seguir las instrucciones y las recomendaciones específicas de cada modelo refiriéndose a las documentaciones técnicas de los equipos en los cuales se usan las baterías.</i>			
<b>Marcas</b>	<b>Equipo</b>	<b>Modelos</b>	<b>PN</b>
Novacor / Diasys	Monitor	Mapa	ACC-0750-00
Identificación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES	Tecnología	NiMH
		Tipo	prismatic cell
		Designación IEC	3 HF18/07/49
		Tensión nominal	3.6V
		Capacidad nominal	0.8Ah
		Resistencia interna $\Omega$	105m $\Omega$
<i>La tensión y la capacidad real en uso pueden verse afectadas por diversos factores: la temperatura, la corriente de descarga, eel histórico del pack (ej.: aplicación, almacenamiento), etc</i>			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	CARGA	Tensión de carga maxi	V
		Corriente Carga Estándar (15h)	mA
		Corriente Carga Rápida (2,5h)	mA
	DESCARGA	Rango de tensión de uso	3V a 4.2V
		Tensión min en descarga	3V
		Corriente de descarga maxi	1000mA
		Vida útil al 80% DOD (0,5 C)	>500 Ciclos
	MANTENIMIENTO	Frecuencia cargas de manten. a 20°C	6 Mes(es)
	ELECTRÓNICA DE CONTROL	Protección eléctrica	No
		Corte tensión baja	No
		Corte tensión alta	No
		Corriente max de corte	No
<i>Estos dispositivos están concebidos para proteger el pack en caso de fallo del dispositivo. No deben usarse para controlar la descarga. Los circuitos de protección tienen un tiempo de respuesta de unos milisegundos.</i>			
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	Dimensiones (+/- 2mm)	Largo	18.2mm
		Ancho	17.1mm
		Alto	59.3mm
	Peso (+/- 5g)	62Gr.	
	Protección mecánica	Shrink sleeve	
	Largo cables (+/- 10mm)	None	
Terminación	None		
CONDICIONES DE USO, DE ALMACENAMIENTO & DE TRANSPORTE	CONDICIONES DE USO	Temperatura de carga	0 a 45°C
		Temperatura de descarga	-20 a 45°C
	CONDICIONES DE ALMACEN.	Temperatura de almacenamiento	-20 a 30°C
		Tasa de humedad	65,00 %
		Duración de almacenamiento maxi	2 Años
	TRANSPORTE	Código UN	Clase 9
		Clasificación ADR/RID	Clase 9
		Clasificación IMDG	Clase 9
Clasificación IATA		Clase 9	






<b>INSTRUCCIONES</b>	<b>PUESTA EN SERVICIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprobar la batería y la conéctica: cables no dañados, batería no hinchada, olor a quemado, oxidación de los contactos, fugas...</li> <li>• Respetar la polaridad</li> <li>• Realizar una carga completa con un cargador adaptado antes de su primer uso</li> </ul>
	<b>CARGA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usar un cargador adaptado</li> <li>• La batería se calienta durante la carga: vigilar durante la primera carga que la temperatura se mantiene en los rangos de uso</li> <li>• En caso de calentamiento anormal, interrumpir la carga desconectando el cargador, y si es posible, desmontar la batería del equipo y solicite la comprobación de la batería, del cargador y del equipo por un profesional.</li> </ul>
	<b>CASO DE BATERÍAS NO SELLADAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante la carga y el uso, es normal que haya una emisión de gases. No fumar al lado de la batería en carga y realice la carga en un local adaptado</li> <li>• Las baterías abiertas necesitan un mantenimiento regular realizado por un técnico especializado</li> </ul>
	<b>CASO DE BATERÍAS DE LITIO IÓN</b>	Las baterías litio ión presentan un riesgo de incendios en estos casos: sobrecarga, corto circuito, carga y uso fuera de los rangos de temperatura y de tensión.
	<b>ADVERTENCIAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultar las instrucciones de uso de su dispositivo</li> <li>• Usar únicamente en dispositivos compatibles</li> <li>• Respetar las condiciones de carga y de almacenamiento</li> <li>• Usar únicamente en dispositivos compatibles</li> <li>• No usar si la batería está dañada, no arrojar al fuego, no agujerear, no desmontar o modificar, no desactivar los circuitos de protección que protegen la batería y el equipo</li> </ul>

<b>EXPLICACIONES SÍMBOLOS</b>	<b>ETIQUETADO</b>	
		Referencia catálogo
		Número de lote
		Dirección fabricante
		Reciclar en estructuras oficiales de recuperación, reciclaje y valorización de los residuos
		Consultar la ficha producto y el manual de instrucciones



SCHEDA PRODOTTO				Scaduto dal 16/01/2023
IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO	Tipo	Batteria ricaricabile		 
	Designazione commerciale	Batterie médicale Novacor MAPA 3.6V 0.8Ah S		
	Referenza	MGH0081		
	EAN	3660766507969		
	Marca	NX		
	Batteria compatibile/originaline	Compatible		
	Confezione	Unitary		
<b>UTILIZZO RACCOMANDATO</b>				
<i>Seguire le istruzioni e le raccomandazioni specifiche indicate sulla documentazione tecnica a corredo</i>				
<b>Marche</b>	<b>Fornitura</b>	<b>Modelli</b>	<b>PN</b>	
Novacor / Diasys	Monitor	Mapa	ACC-0750-00	
Identificazione	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	Tecnologia	NiMH	
		Tipo	prismatic cell	
		Designazione IEC	3 HF18/07/49	
		Tensione nominale	3.6V	
		Capacità nominale	0.8Ah	
		Resistenza interna $\Omega$	105m $\Omega$	
<i>La tensione e la capacità reale durante l'utilizzo possono essere compromessi da diversi fattori come la temperatura, la corrente di scarica, la storia del pacco batteria</i>				
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	CARICA	Tensione di carica massima	5.1V	
		Corrente di carica standard (15 ore)	80mA	
		Corrente di carica rapida (2,5 ore)	400mA	
	SCARICA	Intervallo tensione di utilizzo	3V a 4.2V	
		Tensione minima in scarica	3V	
		Corrente di carica massima	1000mA	
		Durata 80% DOD (0,5 C)	>500 Cicli	
	MANUTENZIONE	Frequenza dei cicli di carica a temperatura 20°C	6 Mesi	
	ELETTRONICA DI CONTROLLO	Protezione elettrica	No	
		Sezionamento bassa tensione	No	
		Sezionamento alta tensione	No	
		Corrente massima di sezionamento	No	
<i>Questi apparecchi sono concepiti per proteggere il pacco batteria in caso di difetto. Non vanno utilizzati per controllare la scarica. I circuiti di protezione rispondono dopo qualche millisecondo.</i>				
CARATTERISTICHE MECCANICHE	Dimensioni (+/- 2mm)	Lunghezza	18.2mm	
		Larghezza	17.1mm	
		Spessore	59.3mm	
	Peso (+/- 5g)	62Gr.		
	Protezione meccanica	Shrink sleeve		
	Lunghezza fili (+/- 10mm)	None		
Terminali	None			
CONDIZIONI DI UTILIZZO, DI CONSERVAZIONE & DI TRASPORTO	CONDIZIONI DI UTILIZZO	Temperatura di carica	0 a 45°C	
		Temperatura di scarica	-20 a 45°C	
	CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	Temperatura di inutilizzo	-20 a 30°C	
		Tasso di umidità	65,00 %	
		Durata massima di inutilizzo	2 Anni	
	TRASPORTO	Codice UN	Classe 9	
		Classificazione ADR/RID	Classe 9	
		Classificazione IMDG	Classe 9	
Classificazione IATA		Classe 9		
ISTRUZIONI	MESSA IN MOTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare batteria e terminali: fili non rovinati, batteria non gonfia, odore di bruciato, contatti ossidati, fuoriuscite</li> <li>Rispettare il senso dei poli</li> <li>Realizzare una carica completa con un caricabatteria adeguato prima del primissimo utilizzo</li> </ul>		
	CARICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare un caricabatteria adeguato</li> <li>La batteria si scalda durante la il processo di carica: sorvegliare che la temperatura rimanga nella norma</li> <li>In caso di surriscaldamento eccessivo, interrompere il processo di carica, smontare la batteria e far controllare da un tecnico l'apparecchio, la batteria e il caricabatteria</li> </ul>		
	CASI BATTERIE NON ERMETICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante il processo di carica è normale che venga sprigionato del gas, Non fumare. Ricaricare in un locale adeguato.</li> <li>Le batterie aperte richiedono una certa manutenzione da parte di un tecnico.</li> </ul>		




	<b>CASI BATTERIE LI-ION</b>	Le batterie Li-Ion presentano un rischio di incendio nei casi seguenti: surriscaldamento, corto circuito, carica al di fuori dell'utilizzo e delle temperature indicate
	<b>AVVERTENZE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultare il foglietto illustrativo dell'apparecchio.</li> <li>• Utilizzare solo negli apparecchi indicati</li> <li>• Rispettare le condizioni di carica e di conservazione</li> <li>• Utilizzare solo per gli apparecchi compatibili</li> <li>• Non utilizzare se la batteria è rovinata. Non bruciare, non perforare, non smontare, non modificare, i circuiti della protezione della batteria e dell'apparecchio: non disattivare.</li> </ul>






<b>SPIEGAZIONE SIMBOLI</b>		Referenza catalogo
		Numero lotto
		Indirizzo del produttore
		Da riciclare in apposite strutture
		Consultare la scheda tecnica e il manuale d'utilizzo

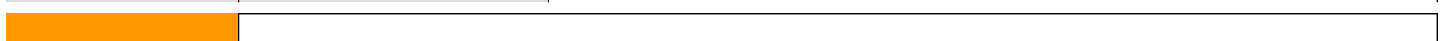

Eigenschaften			Abgelaufen seit dem 16/01/2023	
Identifizierungsinformation des medizinischen Geräts	Typ	Wiederaufladbarer Akku		 
	Handelsbezeichnung	Batterie médicale Novacor MAPA 3.6V 0.8Ah S		
	Referenz	MGH0081		
	EAN	3660766507969		
	Marke	NX		
	Originalakku / Ersatzakku	Compatible		
	Verpackung	Unitary		
<b>Empfehlung</b>				
<i>Bitte lesen Sie genau die Betriebsanleitungen und technische Dokumente der Geräte/Modelle, in denen den Akku verwendet wird.</i>				
<b>Marken</b>	<b>Geräte</b>	<b>Modelle</b>	<b>PN / Seriennummer</b>	
Novacor / Diasys	Monitor	Mapa	ACC-0750-00	
Identifizierung	Allgemeine technische Eigenschaften	Technologie	NiMH	
		Typ	prismatic cell	
		IEC Bezeichnung	3 HF18/07/49	
		Nennspannung	3.6V	
		Nennleistung	0.8Ah	
		Innenwiderstand $\Omega$	105m $\Omega$	
<i>Die richtige Spannung und Kapazität im Betrieb kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter Temperatur, Entladestrom, Verpackungstyp (z. B. Anwendung, Lagerung).</i>				
Elektrische Eigenschaften	Ladung	Max. Ladespannung	5.1V	
		Ladespannung Standard (15h)	80mA	
		Schnellladung (2,5h)	400mA	
	Entladung	Betriebsspannung	3V bis 4.2V	
		Min. Spannung in der Entladung	3V	
		Max. Entladestrom	1000mA	
		Lebensdauer 80% DOD (0,5 C)	>500 Zyklen	
	Wartung	Wartungslastfrequenz bei 20°C	6 Monate	
	Steuerungselektronik	Elektrischer Schutz	Nein	
		Stromausfall bei Niederspannung	Nein	
Stromausfall bei Hochspannung		Nein		
Max. Schaltstrom		Nein		
<i>Diese Geräte sind nur dazu bestimmt, das Paket im Falle von Hardwareausfällen zu schützen. Sie sollten nicht zur Kontrolle der Entladung verwendet werden. Die Schutzschaltungen haben eine Reaktionszeit von wenigen Millisekunden.</i>				
Mechanische Eigenschaften	Abmessungen (+/- 2mm)	Länge	18.2mm	
		Breite	17.1mm	
		Dicke	59.3mm	
	Gewicht (+/- 5g)	62Gr.		
	Mechanischer Schutz	Shrink sleeve		
	Drahtlänge (+/- 10mm)	None		
Kabelabschluss	None			
Nutzungs-, Lagerungs-, Transportbedingungen	NUTZUNGSBEDINGUNGEN	Ladungstemperatur	0 bei 45°C	
		Entladungstemperatur	-20 bei 45°C	
	LAGERUNGSBEDINGUNGEN	Lagerungstemperatur	-20 bei 30°C	
		Feuchtigkeitsgehalt	65,00 %	
		Max. Lagerungsdauer	6 Jahre	
	TRANSPORT	UN Code	Classe 9	
		ADR/RID Klassifizierung	Classe 9	
		IMDG Klassifizierung	Classe 9	
IATA Klassifizierung		Classe 9		

<b>ANWEISUNGEN</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollieren Sie den Akku und Anschlüsse : unbeschädigte Kabel, nicht aufgeblähter Akku, Brandgeruch, Oxidation der Kontakte, Leckage.</li> <li>• Polarität beachten</li> <li>• Vor dem ersten Gebrauch mit einem geeigneten Ladegerät eine vollständige Ladung durchführen</li> </ul>
	<b>Laden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie ein geeignetes Ladegerät.</li> <li>• Der Akku erwärmt sich während des Ladevorgangs: Stellen Sie sicher, dass die Temperatur beim ersten Ladevorgang innerhalb des Betriebsbereichs bleibt.</li> <li>• Im Falle einer anormalen Erwärmung unterbrechen Sie die Ladung, indem Sie das Ladegerät so weit wie möglich vom Stromnetz trennen und den Akku aus dem Gerät nehmen und das Gerät, das Ladegerät und den Akku von einem Techniker überprüfen lassen.</li> </ul>
	<b>Im Fall eines unversiegelten Akkus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Während des Ladevorgangs und des Gebrauchs ist es normal, dass Gas freigesetzt wird. Nicht rauchen. Laden Sie das Gerät in einen geeigneten Raum.</li> <li>• Die Nassbatterien erfordern eine regelmäßige Wartung, die von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden muss.</li> </ul>
	<b>Im Fall eines Lithium-Ion Akkus</b>	Die Lithium-Ionen-Akkus stellen in folgenden Fällen eine Brandgefahr dar: Überladung, Kurzschluss, Laden und Verwendung außerhalb des Temperatur- und Spannungsbereichs.
	<b>Warnungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beachten Sie die Anweisungen für Ihr Gerät.</li> <li>• Nur in kompatiblen Geräten verwenden.</li> <li>• Beachten Sie die Lade- und Lagerbedingungen.</li> <li>• Nur in kompatiblen Geräten verwenden.</li> <li>• Nicht verwenden, wenn der Akku beschädigt ist. Nicht verbrennen, bohren, zerlegen oder modifizieren, die Schutzschaltungen schützen den Akku und die Geräte: deaktivieren Sie sie nicht.</li> </ul>



<b>Symbolerklärungen</b>	<b>Etikettierung</b> 	Bestellnummer
		Warennummer
		Anschrift des Herstellers
		Zur Wiederverwertung in einer geeigneten Verwertungs- und Recyclingstruktur
		Lesen Sie das Produktblatt und das Benutzerhandbuch.

